




SOOO HAFTSTARK
IST **MUCOPREN®** SOFT

UNTERFÜTTERUNG

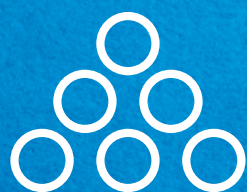

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Prothesenunterfütterung

Mucopren® Soft ist ein dauerhaft weichbleibendes Langzeit-Unterfütterungsmaterial auf A-Silikon Basis für die **direkte und indirekte Anwendung**.



Besondere Langzeithaftung:
Hervorragende Haftvermittlung an Kunststoffprothesen durch patentiertes Mucopren® Adhäsiv



Einzigartige Versiegelung durch sehr glatte, hydrophobe Silikonoberfläche:
Hemmt die Bakterienansiedlung und sorgt so für hygienische Verhältnisse an der Prothese¹⁾



Anwendungsvideo

Einfaches Handling & schnelle Bearbeitung

Moderne Abbindezeiten und kurze Liegezeiten sorgen für einen schnellen und reibungslosen Ablauf in Praxis und Labor.

Unterstützt den Heilungsprozess bei Implantaten

Auch zur Verwendung in der Implantologie geeignet für die störungsfreie Osseointegration.



Hoher Tragekomfort

Die weichbleibende Unterfütterung ist völlig geruchs- und geschmacksneutral und macht das Tragen der Prothese so angenehm wie möglich.

Marktführer

im Bereich „Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial“ (GfK²⁾)





WEITERE INDIKATIONEN



- Für die Erstellung von **dauerhaft weichbleibenden Unterfütterungen**
- Zur Entlastung des Operationsgebietes nach Insertion von **Implantaten**
- Zum Ausgleich von Schleimhautbezirken mit unterschiedlicher Resilienz
- Zur Entlastung von scharfen Knochenkanten
- Für die Unterfütterung von **Interimprothesen**
- Als **Schleimhaut-Conditioner** bei einer Prothesenstomatitis
- Zur Erstellung und Unterfütterung von **Obturatoren**

Anwendungsvorteile durch das neue Adhäsiv

NUR **1x** AUFTRAGEN
NOTWENDIG



CHAIRSIDE

3 MIN

Bei **direkter** Anwendung:
Nach nur **3 Minuten** Liegezeit nach Mundentnahme kann die Prothese weiter bearbeitet werden.



LABSIDE

3 MIN

Bei **indirekter** Anwendung:
Die Liegezeit verkürzt sich auf nur noch **3 Minuten** im Drucktopf oder Wasserbad.

¹⁾ Ergebnis aus in-vitro Studien, in denen nachgewiesen wurde, dass das Wachstum von Candida albicans dank der glatten Silikonoberfläche verhindert werden konnte

²⁾ Gesellschaft für Konsumforschung

MUCOPREN® SOFT- DAS SORTIMENT



Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Basis-Set	REF 28105	50 ml Mucopren® Soft, 50 ml Versiegelungssilikon, 10 ml Mucopren® Adhesive, 6 Mischkanülen weiß, 16 Mischkanülen orange, 1 Pinselhalter, 20 Einwegpinsel, 1 Stahlfräser, Zubehör
Mucopren® Soft Normal pack	REF 15687	2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 Mischkanülen weiß
Mucopren® Versiegelungssilikon	REF 15686	50 ml Mucopren® Versiegelungssilikon, 8 Mischkanülen orange
Mucopren® Adhesive	REF 14203	10 ml Mucopren® Adhesive



Technische Daten

Produktname	Mischverhältnis	Verarbeitungszeit bei 23 °C ≤	Mundverweildauer bei 35 °C ≥	Wasserbad	Abbindeende ≥	Shore-Härte (ca.)
Mucopren® Soft – direkte Unterfütterung	1:1	2:15 Min.	3:15 Min.	Nicht zutreffend	5:30 Min.*	A 28
Mucopren® Soft – indirekte Unterfütterung	1:1	2:15 Min.	Nicht zutreffend	3:00 Min.	> 3 Min.	A 28
Mucopren® Versiegelungssilikon	1:1	1:30 Min.	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	6:30 Min. bei 23°C	A 33

*Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung

NOTIZEN

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

012738_4924

