

WORLD OF  
RESTORATION



# VISALYS® BULK FLOW



## AUFFALLEND ÄSTHETISCH



NEU

**FLIESSFÄHIGES ONE-SHADE BULK KOMPOSIT**


  
KETTENBACH DENTAL  
Simply intelligent

# VISALYS® BULK FLOW

**VISALYS® BULK FLOW**, unser lichthärtendes, fließfähiges Nano-Hybrid-Füllungskomposit für das Füllen von Kavitäten bis 4 mm Tiefe. Es vereint Effizienz, Stabilität und Ästhetik.



Faszinierende Farbanpassung mit nur einer Farbe dank des One-Shade Systems. Ein echter Chamäleon-Effekt mit natürlicher Fluoreszenz für naturgetreue Restaurationen.

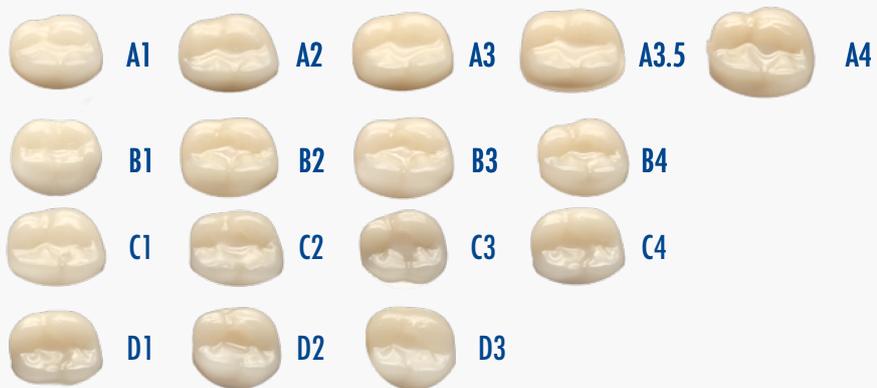

Beispielhafte Füllungen mit VISALYS® BULK FLOW in den Vita-Farben



Exzellente Polierbarkeit für Hochglanz-Ergebnisse

## ANWENDERSTIMMEN

**VISALYS® BULK FLOW** überzeugt mit angenehmer Verarbeitung, guter Farbanpassung und ausgezeichnetem Glanz.

Dr. Maximilian Dobbertin



# ÜBERZEUGENDE KONSISTENZ

**VISALYS® BULK FLOW** verhält sich wie ein Flow, ist aber stabil und modellierbar wie ein Fill.

Es bietet hohe Standfestigkeit und gleichzeitig eine hohe Röntgensichtbarkeit. Niedrige Schrumpfkraft gewährleisten einen sicheren Haftverbund.

## Kein Nachlaufen dank intelligentem Spritzen-Design.


Präzise Füllungen ohne Materialverlust, dank der eingebauten beweglichen Dichtung.



KONSISTENZ  
EINES  
**FLOW**  
MIT DER  
VERARBEITBARKEIT  
EINES **FILL**



# AUFFALLENDE ÄSTHETISCH

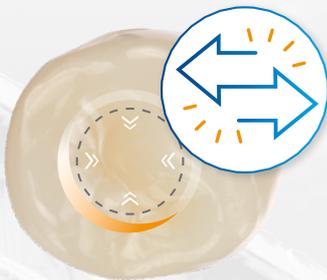

Der **echte Chamäleon-Effekt** unseres **One-Shade Systems** und **natürliche Fluoreszenz** sorgen für lebendige, naturgetreue Restaurationen.



Bereits ab 3 mm Schichtdicke\* **kein Durchscheinen mehr von Verfärbungen**



**VISALYS® BULK FLOW**



**OMNICHROMA FLOW BULK**

\*Beispielhafte 3 mm-Scheiben aus jeweiligem Füllungsmaterial, Farbe "Universal"



Effizientes Arbeiten **ohne Inkremente** und ohne **zusätzliche Deckschicht**



**FREI VON  
BIS-GMA**




## AUSGEZEICHNETE RANDSPALTADAPTION

Die ausgezeichnete Adaption des Materials an die Kavitätenwände reduzieren das Risiko von Randspalten und Verfärbungen für langlebige Restaurationen.

Randqualität  
Schmelz




Übersicht Kausimulation Marburger Kausimulator (TMWB)\*

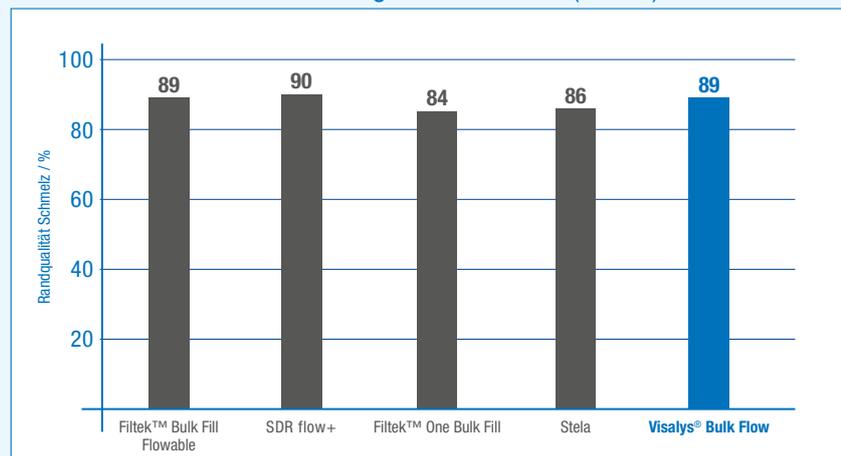

Randqualität  
Dentin




Übersicht Kausimulation Marburger Kausimulator (TMWB)\*

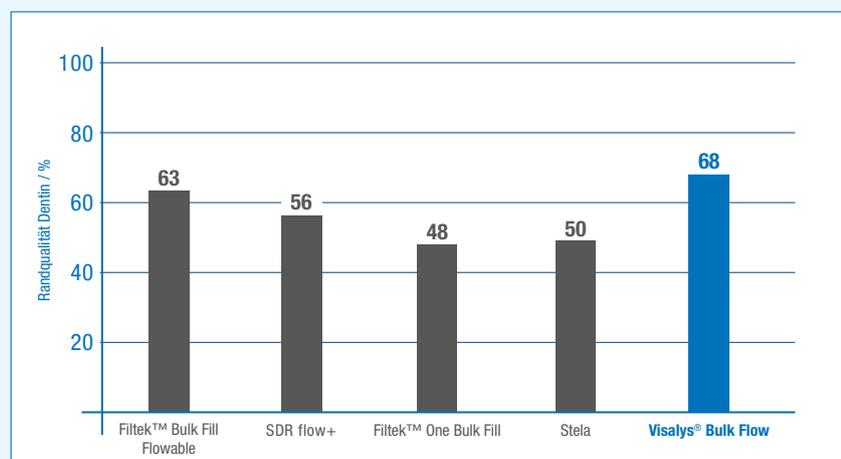

\*Messungen Prof. Roland Frankenberger, Universität Marburg, 2024.  
Thermo-Mechanische Wechselbelastung: 1.000.000 Zyklen à 50 N, 25.000 Thermozyklen (5/55 °C), 264 Zähne (n=8), MOD Klasse II.

# DAS SORTIMENT

**VISALYS® BULK FLOW**

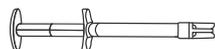

1 x 2 g Syringe  
5 x Applikationskanülen

REF 15064

**VISALYS® BULK FLOW**



15 x 0,25 g Caps

REF 15066

2 x 0,25 g Caps

REF 15067



Made in  
Germany

Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefon +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.de



00110894\_1125

**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent